

3M

Filtek™

**One
Bulk Fill Restorative**



**Lo scegliete
per la velocità.
Lo sceglierete
anche per l'estetica.**



Voi lo apprezzerete per la sua semplicità.
I vostri pazienti saranno felici anche
del risultato estetico.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative



È vero. Ora il restauro eseguito con tecnica bulk può essere più estetico

I restauri posteriori rappresentano una sfida – ecco perché i compositi da otturazione in massa che semplificano e velocizzano la procedura sono diventati così popolari.


Però, l'applicazione più rapida e più semplice di questi compositi può andare a scapito dell'estetica. Quindi, in quanto leader nell'estetica e nelle tecnologie restaurative, abbiamo impegnato i nostri esperti per trovare una soluzione che certamente amerete

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

Sviluppato per i posteriori, le sue esclusive caratteristiche ottiche e la migliorata opacità vi garantiscono la semplicità dell'applicazione one-step – fino a 5 mm – senza compromettere i risultati estetici finali.

Ora voi e i vostri pazienti avete qualcosa per cui sorridere.

- Applicazione one-step rapida e semplice
- Maggior opacità per un'estetica migliorata
- Minor stress per permettere una profondità di polimerizzazione fino a 5 mm
- Eccellente adattamento
- Nessuna necessità di stratificazione
- Eccellente lavorabilità e modellabilità
- La vera nanotecnologia di 3M assicura una resistenza all'usura superiore e il mantenimento della lucidatura nel tempo
- Elevata radiopacità
- Esclusivo design della punta per un accesso più semplice alle cavità profonde
- Disponibile in 5 colori

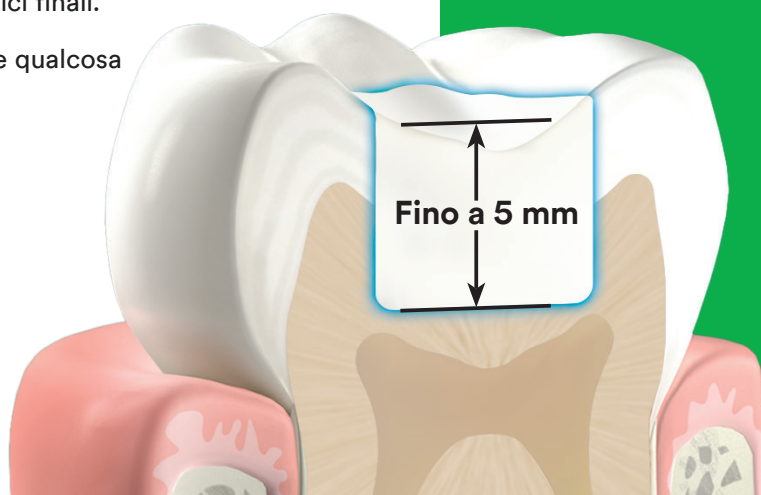

Come 3M permette la semplicità dell'applicazione one-step in massa con un'estetica migliorata.

Le tecnologie alla base di 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

Novità!

Gestione efficace del Contrast Ratio

Aumenta l'opacità senza sacrificare la profondità di polimerizzazione


Un ulteriore miglioramento della nanotecnologia di 3M permette di gestire l'opacità e la profondità di polimerizzazione in maniera più intelligente. Grazie all'esclusiva tecnologia, Smart Contrast Ratio Management, è stata aumentata l'opacità, senza ridurre la profondità di polimerizzazione. Nel suo stato polimerizzato, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative ha un'opacità maggiore di quella di 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative, con il risultato di un'estetica migliorata.

Lo sapevate?

Contrast Ratio

Il Contrast Ratio è la misura della traslucenza od opacità del materiale.


Contrast Ratio

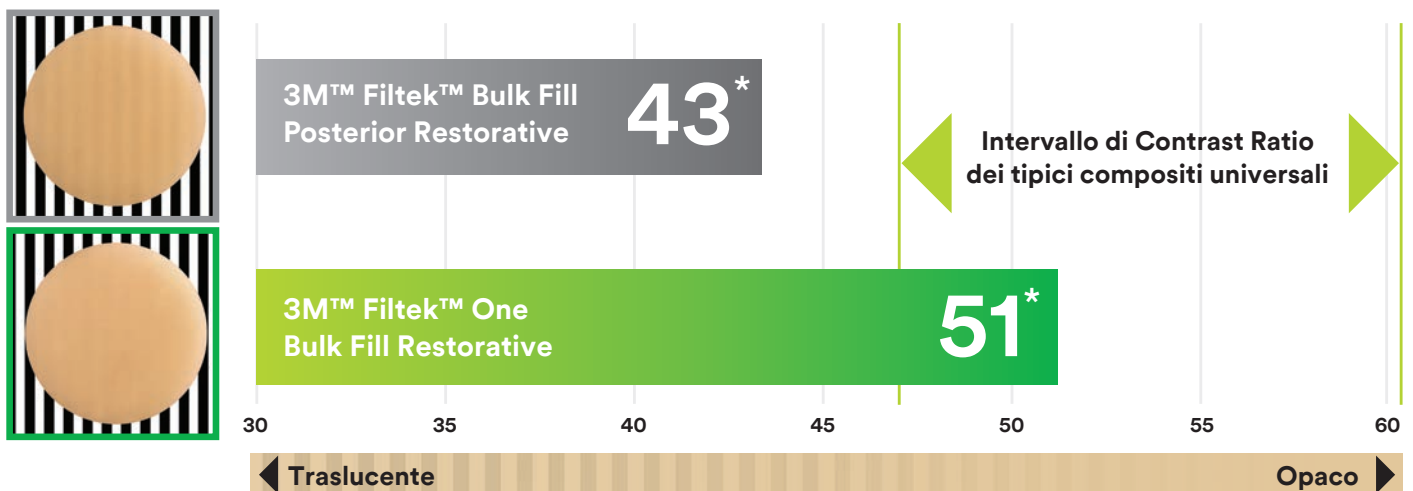

*Il Contrast Ratio è la media di tutti i colori.

Monomeri AUDMA e AFM innovativi

Riduzione della contrazione e dello stress per permettere un'applicazione in massa fino a 5 mm.

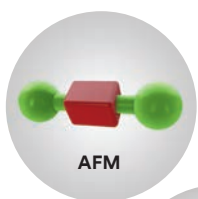

Il monomero a frammentazione addizione AFM diminuisce lo stress durante la polimerizzazione.




Il dimetacrilato di uretano aromatico (AUDMA) aiuta a ridurre l'entità della contrazione e dello stress che si verificano durante la polimerizzazione.


La vera tecnologia dei nanoriempitivi di 3M

Assicura una resistenza all'usura superiore e un eccellente mantenimento della lucidatura.

Ingrandimento 5K del nanocluster

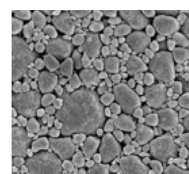

Ingrandimento 50K del nanocluster

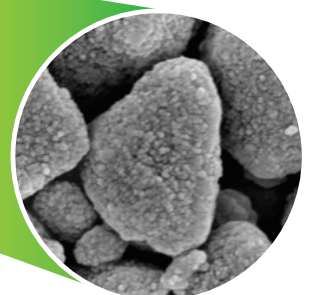

Sof-Lex™ Diamond Polishing System. Lucidate con i diamanti. Senza usare la pasta.



Sof-Lex™ Diamond Polishing System. Particelle di diamante. Per una meravigliosa lucentezza.



Sof-Lex™ Spiral Wheels per pre-lucidatura

La spirale di pre-lucidatura (beige) liscia e rimuove i graffi nei restauri che si formano durante la modellazione e prepara la superficie per una lucidatura ad elevata brillantezza.

Sof-Lex™ Diamond Spiral Wheels per lucidatura

La spirale diamantata per lucidatura (rosa) contiene particelle di diamante per creare una lucidatura liscia e ad elevata brillantezza.

Sarete entusiasti di come sia facile creare un bel sorriso!

Le spirali multi funzione Sof-Lex™ possono essere sterilizzate e riutilizzate, rendendole così una scelta economica per la vostra attività. Dato che le particelle abrasive sono inglobate nelle spirali in gomma, si possono utilizzare tutte le superfici del design della spirale: quelle laterali, superiori, inferiori e i bordi. E potete anche dimenticare la necessità di fermarvi per passare dalle punte tradizionali alle coppette, ai dischi e agli spazzolini. Le spirali flessibili si adattano a tutte le superfici dei denti – anteriori e posteriori, convesse e concave.

Informazioni per l'ordine



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

Ricambio	Codice	Codice
Colore	Siringa	Capsula
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

I RICAMBI IN SIRINGA includono: 1 siringa da 4 g; guida tecnica; Istruzioni per l'uso.

I RICAMBI IN CAPSULA includono: 20 capsule da 0,2 g; guida tecnica; Istruzioni per l'uso.



3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Codice	Informazioni sul prodotto
5092-IM	Sof-Lex™ Diamond Polishing System—Intro Kit Kit include: 5 Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura (Beige); 5 Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura (Rosa); Istruzioni per l'uso; Scheda Tecnica, 1 mandrino
5090	Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura —Ricambio Include: 15 Sof-Lex Spirali di Pre-Lucidatura (Beige)
5091	Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura—Ricambio Include: 15 Sof-Lex Spirali Diamantate per Lucidatura (Rosa)

I prodotti della linea Filtek™ e Soflex™ sono dispositivi medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.



3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pogliano (MI)

Tel. 02 7035 3537
www.3mitalia.it

3M, Soflex e Filtek sono marchi di fabbrica di 3M o 3M
Deutschland GmbH. Usati in Canada dietro licenza.

© 3M 2017. Tutti i diritti riservati

TK 2017/844979